




# Matelas à air anti-escarres Alternating Domus 1

## Réf . L8000

### Rabats d'extension

Peuvent être glissés sous le matelas standard pour assurer la stabilisation.

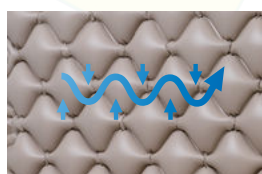

**Matelas en PVC de qualité médicale**  
 Facile à nettoyer, respectueux de la peau et ignifuge.



### Crochets réglables

Compatibles avec la plupart des cadres de lit.




Le Domus 1 est idéal pour la prévention et le traitement des patients à risque de lésions dues à la pression.

Ce matelas léger et compact à pression alternée est composé de cellules à bulles de 2,5 pouces de hauteur, et s'utilise comme alternative aux produits plus lourds tels que les surmatelas en gel.

Le système est idéal pour une utilisation de courte durée et facile à installer.

Avec une pompe à pression réglable et des rabats d'extension sur les côtés supérieur et inférieur du matelas à bulles pour éviter le glissement, le Domus 1 est conçu comme un excellent matelas de transition pour les soins à domicile.

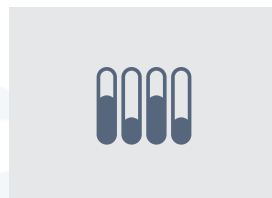



### Redistribution optimale de la pression

Offre un mode alterné pour une meilleure prévention des lésions dues à la pression.



### Réglage intuitif de la pression

Référence d'indicateur de poids analogique pour un ajustement de la pression facile et intuitif.

Spécifications		Domus 1			
<b>Pompe</b> 	Dimensions	25 x 12,5 x 8,5 cm (9,8 x 4,9 x 3,3 pouces)			
	Poids	1.4 kg ( 3.1 lb )			
	Matériau du boîtier	ABS ignifuge			
	Tension d'alimentation	100-240V / 50-60Hz			
	Mode de thérapie	Mode alterné			
	Niveau sonore	< 40dB			
<b>Matelas</b> 	Cellules	Longueur	Largeur	Hauteur	
	Dimensions (du matelas)	Monobloc	196cm	90cm	6.3cm (2.5 in)
		Matelas à bulles	(77.2 in)	(35.4 in)	in)
	Type	Surmatelas			
	Poids	2.3kg ( 5.1 lb)			
	Matériau de la housse supérieure	N/A			
	Matériau des cellules	PVC de qualité médicale			
Poids maximal du patient	100kg( 220 lb )				