

Pèse-bébé mécanique à poids coulissants

seca

La précision au service de la santé

seca 725

- + Toujours prêt à l'emploi sans pile ni alimentation électrique
- + Précision identique à celle des pèse-bébés électroniques
- + Toutes les pièces résistent à la corrosion : l'humidité n'est pas un problème
- + Plateau amovible pour un nettoyage plus facile
- + Poids coulissant supplémentaire pour le tarage de langes, etc.
- + Selon le modèle, avec un niveau à bulle et des pieds réglables



seca 725

Pèse-bébé mécanique à poids coulissants




Pèse-bébé mécanique haut de gamme extrêmement précis

Le seca 725 est durable, robuste et extrêmement précis grâce à sa mécanique sophistiquée. Les graduations de lecture sur la barre à poids coulissants sont suffisamment fines pour rivaliser avec la précision d'un pèse-bébé numérique. À la différence que le seca 725 n'a besoin d'aucune alimentation électrique. Le seca 725 est donc probablement l'un des pèse-bébés les plus fiables et les plus précis du monde.



Désinfection et nettoyage faciles

Tandis que le bébé se trouve dans le plateau sécurisé doté de bords relevés, le poids peut être déterminé en quelques gestes. Le plateau peut être retiré de la base en desserrant deux leviers de blocage pour le désinfecter et le nettoyer facilement. La surface du pèse-bébé présente un scellage robuste résistant aux rayures et l'intérieur est résistant à la corrosion. Ainsi, le pèse-bébé peut faire face aux conditions climatiques difficiles et fournit toujours des résultats précis même en cas d'humidité élevée.

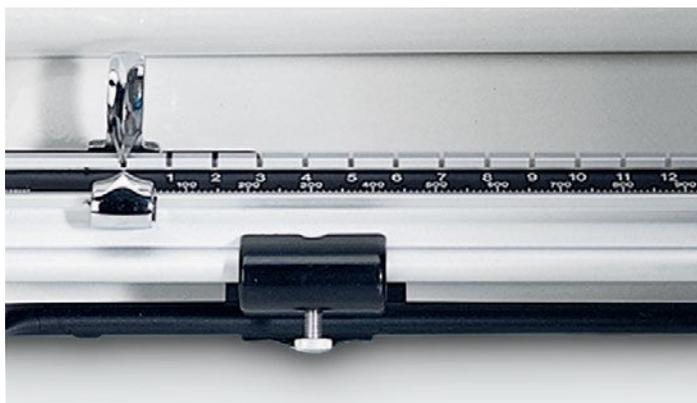

Tarage du pèse-personne pour une pesée encore plus précise

Le seca 725 est équipé d'une tare et d'une vis de tarage fin. Cela permet de déterminer très précisément le poids net. De plus, le poids des serviettes de bain posées ou des couches peut être déduit.

Capacité	16 kg
Graduation	5 g
Dimensions (LxHxP)	550 × 180 × 290 mm / 21.7 × 7.1 × 11.4 in
Dimensions du plateau (LxHxP)	550 × 110 × 270 mm / 21.7 × 4.3 × 10.6 in
Poids net	6.4 kg / 14.1 lbs
Fonctions	Réglage du zéro
Medical Device Regulation (MDR) certifié	

seca international
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hambourg
Allemagne

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

La précision au service de la santé

seca.com