


Pèse-personne plat avec boutons-poussoirs au pied et double affichage

seca

La précision au service de la santé

seca 874

- + L'affichage double permet au médecin et au patient de lire le poids simultanément
- + Qualité seca résistante et durable, une qualité qui s'avère payante
- + Plus besoin de se pencher grâce à la commande d'allumage au pied
- + Peut être utilisé avec des piles ou sur secteur (bloc alimentation en option)
- + Fonction Tare-mère pour peser les enfants en bas âge

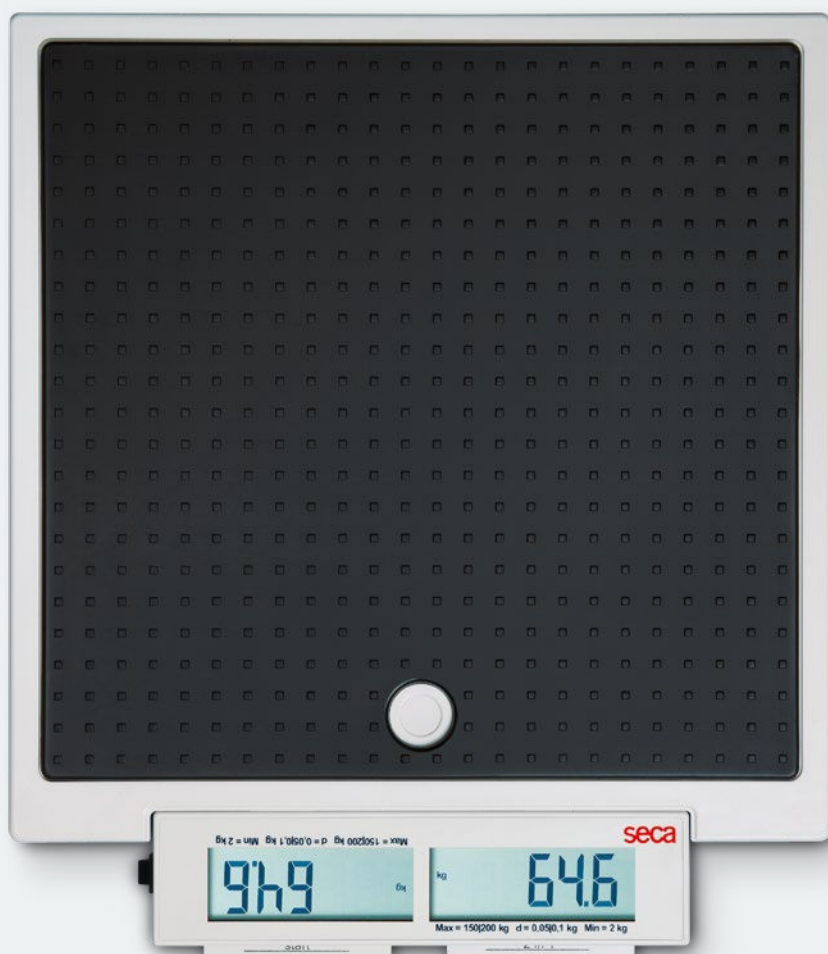

seca 874

Pèse-personne plat avec boutons-poussoirs au pied et double affichage




Une lecture deux fois meilleur

L'affichage du seca 874 est équipé d'un câble permettant une commande plus flexible et une lecture facile. L'affichage avec l'élément de commande peut être monté au mur ou posé sur une table. Ceci est par exemple idéal pour des examens médicaux en série avec un poste de travail temporaire. Avec sa poignée, son faible poids et sa grande stabilité, le seca 874 est également idéal pour le transport.

Capacité	200 kg / 440 lbs
Graduation	50 g < 150 kg > 100 g / 0.1 lb < 330 lbs > 0.2 lb
Dimensions (LxHxP)	321 × 60 × 361 mm / 12.6 × 2.4 × 14.2 in
Dimensions de la plateforme (LxHxP)	288 × 60 × 280 mm / 11.3 × 2.4 × 11 in
Poids net	4.1 kg / 9 lbs
Alimentation électrique	Piles
Fonctions	Auto-HOLD, Extinction automatique, Commutation kg/lbs, TARE-mère
Accessoires	+ Sac à dos seca 409 + Sacoche de transport seca 414 + Sacoche de transport seca 415 + Élément de raccord seca 437

Medical Device Regulation (MDR) certifié

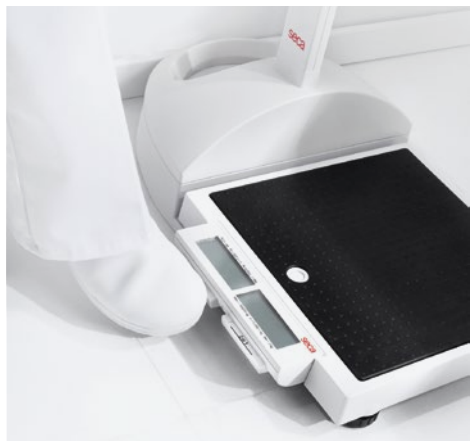

Installez-le, effleurez-le et pesez

Équipé de pieds réglables et d'un niveau à bulle, le pèse-personne plat seca 874 reste parfaitement stable même sur un sol irrégulier. Léger et doté d'une poignée, le seca 874 fonctionne sur piles (autonomie : plusieurs milliers de pesées par jeu de piles) et convient ainsi parfaitement à une utilisation mobile. Les commandes d'allumage au pied permettent d'activer le pèse-personne et la fonction TARE-mère pour peser un enfant dans les bras de sa mère.



La qualité seca : résiste aux chocs et aux conditions d'humidité extrêmes

Lors de tests approfondis, non seulement la capacité de charge est vérifiée, mais également la résistance à l'humidité et à la chaleur, ainsi que la résistance aux chocs. Cadre en acier stable, composants nervurés et plastique ABS de qualité supérieure servant également à la fabrication de casques de moto : les pèse-personne seca dépassent toutes les attentes. Sa longue durée de vie est garantie, aussi bien dans une pièce climatisée que dans un hôpital ambulant au cœur de la forêt tropicale.

seca international
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hambourg
Allemagne

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

La précision au service de la santé

seca.com